

Ormco™

# DAMON ULTIMA™ SYSTEM



IL PRIMO VERO SISTEMA AD ESPRESSIONE COMPLETA



## PRESENTIAMO IL RIVOLUZIONARIO SISTEMA DAMON ULTIMA™

Progettato per una finitura più veloce e precisa

I fili e i bracket ad auto legatura passiva tradizionale hanno un gioco significativo, con conseguenti scarso controllo, necessità di regolazioni manuali e tempi di trattamento prolungati.

Il Sistema Damon Ultima è il primo sistema ortodontico ad espressione completa progettato per una finitura più rapida e precisa. È stato completamente riprogettato per eliminare virtualmente il gioco al fine di ottenere un controllo preciso della rotazione, dell'angolazione e del torque.



“ Il primo sistema filo-bracket finalmente in grado di offrire una vera espressione completa. ”

- Dr. Dwight Damon


## SISTEMA INTEGRATO CHE ELIMINA VIRTUALMENTE IL GIOCO DEL FILO NELLO SLOT

Il Sistema Damon Ultima è progettato con un filo proprietario rettangolare con lati arrotondati e uno slot a forma di parallelogrammo per offrire un ingaggio diretto nei punti di contatto verticali e orizzontali.



**PSL TRADIZIONALE**

Gioco eccessivo con  
conseguente scarso  
controllo

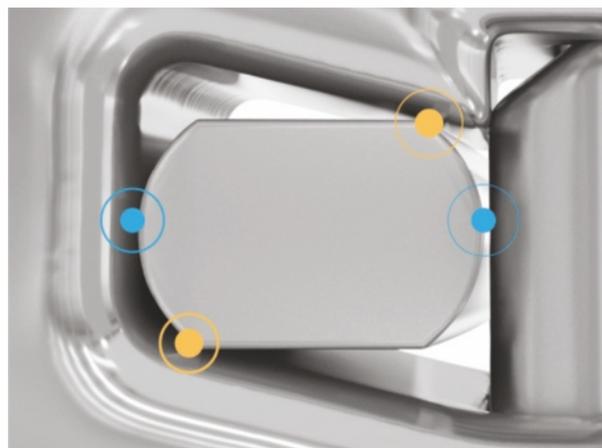

**SISTEMA DAMON ULTIMA**

Quattro punti di contatto per un  
controllo preciso di rotazione,  
angolazione e torque

## CONTROLLO PRECISO DI ROTAZIONE, ANGOLAZIONE E TORQUE

Controllo precoce con rotazioni completate con il primo filo rettangolare con lati arrotondati Damon Ultima ed espressione completa con il secondo filo Damon Ultima applicando forze più leggere.

### SEQUENZA ARCHI CLASSICA



Fili tondi  
.014, .018 CuNiTi

**DAMON ULTIMA**  
Filo rettangolare  
con lati arrotondati  
.014 x .0275 CuNiTi

**DAMON ULTIMA**  
Filo rettangolare  
con lati arrotondati  
.018 x .0275 CuNiTi



### ROTAZIONE

L'ingaggio del filo Damon Ultima rettangolare con lati arrotondati nei punti di contatto orizzontali offre un controllo precoce della rotazione.



### ANGOLAZIONE


L'angolazione viene risolta precocemente mediante i contatti verticali.



### TORQUE

L'ingaggio nei punti di contatto verticali offre il controllo del torque e un'espressione completa della prescrizione applicando forze più leggere.

## OPZIONI DI BRACKET RETROCLINE E PROCLINE PER UN MIGLIORE CONTROLLO DEL TORQUE

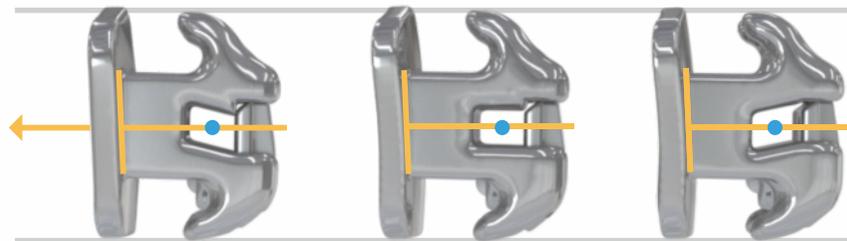

**PROCLINE**  
Torque alto

**NEUTRAL**

**RETROCLINE**  
Torque basso

I bracket sono progettati a partire dal punto centrale dello slot per allinearsi con il punto FA al fine di esprimere il torque desiderato e consentire un posizionamento più facile e preciso.

## OPZIONI DI FILI AGGIUNTIVE PER IL CONTROLLO DEL TORQUE QUANDO NECESSARIO

Misure più grandi disponibili:

- .019 X .0275, .020 X .0275, .021 X .0275e in CuNiTi, TMA e acciaio inossidabile (SS)
- .016 X .0275 SS disponibile per allineamenti e livellamenti impegnativi



## CARATTERISTICHE MIGLIORATE: FACILE, COMODO E AFFIDABILE\*



Aletta completamente riprogettata che migliora la capacità di ingaggio e legatura della catenella elastica C-chain



Sportellino facile da aprire e chiudere con basse forze reciproche e feedback tattile


Filo e sportellino del bracket progettati per ridurre l'interferenza della chiusura dello sportellino



Alette più levigate progettate per un miglior comfort del paziente e una minima interferenza occlusale



Base del bracket con ritenzione da 80 gauge progettata per una forza di adesione affidabile durante l'intero trattamento e un'esperienza di debonding prevedibile

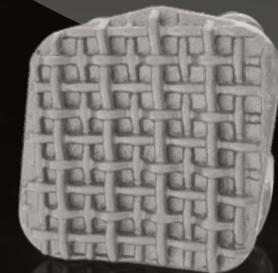

La basetta di forma romboidale e la linea permanente migliorata aiutano a guidare il posizionamento del bracket



Lo slot verticale consente un comodo posizionamento dei ganci drop-in progettati per un uso duraturo con gli elastici e i prodotti ausiliari di Ormco



# INFORMAZIONI PER ORDINE

MASCELLARE	Numero articolo	Descrizione
Centrale Neutro	<b>333-2100</b>	U1L Damon Ultima .022 +7/5/0 Neutro TQ
	<b>333-1100</b>	U1R Damon Ultima .022 +7/5/0 Neutro TQ
Centrale Retrocline	<b>333-2110</b>	U1L Damon Ultima .022 Retrocline TQ
	<b>333-1110</b>	U1R Damon Ultima .022 Retrocline TQ
Centrale Procline	<b>333-2120</b>	U1L Damon Ultima .022 Procline TQ
	<b>333-1120</b>	U1R Damon Ultima .022 Procline TQ
Lateral Neutro	<b>333-2200</b>	U2L Damon Ultima .022 +3/9/0 Neutro TQ
	<b>333-1200</b>	U2R Damon Ultima .022 +3/9/0 Neutro TQ
Lateral Retrocline	<b>333-2210</b>	U2L Damon Ultima .022 Retrocline TQ
	<b>333-1210</b>	U2R Damon Ultima .022 Retrocline TQ
Lateral Procline	<b>333-2220</b>	U2L Damon Ultima .022 Procline TQ
	<b>333-1220</b>	U2R Damon Ultima .022 Procline TQ
Canino Neutro	<b>333-2300</b>	U3L Damon Ultima .022 -2/5/0 Neutro TQ
	<b>333-1300</b>	U3R Damon Ultima .022 -2/5/0 Neutro TQ
Canino Retrocline	<b>333-2310</b>	U3L Damon Ultima .022 Retrocline TQ
	<b>333-1310</b>	U3R Damon Ultima .022 Retrocline TQ
Canino Procline	<b>333-2320</b>	U3L Damon Ultima .022 Procline TQ
	<b>333-1320</b>	U3R Damon Ultima .022 Procline TQ
Premolare (Universale) Neutro	<b>333-2400</b>	U4&5L Damon Ultima .022 -4/2/0 Neutro TQ
	<b>333-1400</b>	U4&5R Damon Ultima .022 -4/2/0 Neutro TQ

Numero articolo	Descrizione
<b>227-1118</b>	Damon Ultima arco TMA 10pk .018x.0275 *
<b>227-1116</b>	Damon Ultima arco TMA 10pk .019x.0275
<b>227-1122</b>	Damon Ultima arco TMA 10pk .020x.0275
<b>227-1123</b>	Damon Ultima arco TMA 10pk .021x.0275
<b>227-1161</b>	Damon Ultima arco CuNiTi w/stops 10pk - .014 X .0275 *
<b>227-1163</b>	Damon Ultima arco CuNiTi w/stops 10pk - .018 X .0275 *
<b>227-1164</b>	Damon Ultima arco CuNiTi w/stops 10pk - .019 X .0275
<b>227-1165</b>	Damon Ultima arco CuNiTi w/stops 10pk - .020 X .0275
<b>227-1166</b>	Damon Ultima arco CuNiTi w/stops 10pk - .021 X .0275
<b>227-1267</b>	Damon Ultima arco SST 10pk .016x.0275 *
<b>227-1272</b>	Damon Ultima arco SST 10pk .018x.0275 *
<b>227-1271</b>	Damon Ultima arco SST 10pk .019x.0275
<b>227-1273</b>	Damon Ultima arco SST 10pk .020x.0275
<b>227-1274</b>	Damon Ultima arco SST 10pk .021x.0275

\* disponibili prossimamente.

MANDIBOLARE	Numero articolo	Descrizione
Centrale Neutro	<b>333-3100</b>	L1L Damon Ultima .022 -1/2/0 Neutro TQ
	<b>333-4100</b>	L1R Damon Ultima .022 -1/2/0 Neutro TQ
Centrale Retrocline	<b>333-3110</b>	L1L Damon Ultima .022 Retrocline TQ
	<b>333-4110</b>	L1R Damon Ultima .022 Retrocline TQ
Central Procline	<b>333-3120</b>	L1L Damon Ultima .022 Procline TQ
	<b>333-4120</b>	L1R Damon Ultima .022 Procline TQ
Lateral Neutro	<b>333-3200</b>	L2L Damon Ultima .022 -1/4/0 Neutro TQ
	<b>333-4200</b>	L2R Damon Ultima .022 -1/4/0 Neutro TQ
Lateral Retrocline	<b>333-3210</b>	L2L Damon Ultima .022 Retrocline TQ
	<b>333-4210</b>	L2R Damon Ultima .022 Retrocline TQ
Lateral Procline	<b>333-3220</b>	L2L Damon Ultima .022 Procline TQ
	<b>333-4220</b>	L2R Damon Ultima .022 Procline TQ
Canino Neutro	<b>333-3300</b>	L3L Damon Ultima .022 -3/5/0 Neutro TQ
	<b>333-4300</b>	L3R Damon Ultima .022 -3/5/0 Neutro TQ
Canino Retrocline	<b>333-3310</b>	L3L Damon Ultima .022 Retrocline TQ
	<b>333-4310</b>	L3R Damon Ultima .022 Retrocline TQ
Canino Procline	<b>333-3320</b>	L3L Damon Ultima .022 Procline TQ
	<b>333-4320</b>	L3R Damon Ultima .022 Procline TQ
1° premolare Neutro	<b>333-3400</b>	L4L Damon Ultima .022 -12/4/0 Neutro TQ
	<b>333-4400</b>	L4R Damon Ultima .022 -12/4/0 Neutro TQ
2° premolare Neutro	<b>333-3500</b>	L5L Damon Ultima .022 -17/4/0 Neutro TQ
	<b>333-4500</b>	L5R Damon Ultima .022 -17/4/0 Neutro TQ

Per maggiori informazioni, contattare  
il proprio rappresentante Ormco.

Visitare [ormco.com/ultima](http://ormco.com/ultima)

**Ormco™**

ORMCO BV  
Basicweg 20  
3821 Amersfoort  
The Netherlands

©2021 Ormco Corporation  
PN: 762-6213 v. 1